

Science made smarter

AS608 / AS608e

Todella nopea
kuuloseula



Diagnostic Suite-ohjelma
(vain AS608e)




Interacoustics

Audiometri


Tympanometri

ABR

OAE

Kuulokojesovitus

Tasapainotutkimus

Kannettava ja helppokäyttöinen

AS608 / AS608e kannettava audiometri on ihanteellinen kouluihin, työterveyshuoltoon ja muihin kohteisiin, missä tehdään nopeaa kuulon seulontatutkimusta. Laite on helppokäyttöinen, eikä vaadi mittavaa käyttökoulutusta. Laitteessa on kalibroidut puhtas- ja uikkuäänekset laajalla taajuusalueella.

Kannettava

AS608 / AS608e sisältää kevyen kantolaukun olkahihnalla, johon mahtuvat audiometri, kuulokkeet ja audiogrammikaavakkeet.

Paristot tai verkkovirta

AS608 / AS608e toimii joko kolmella AA-sormiparistolla tai lääketieteelliseen käyttöön hyväksytyllä ulkoisella verkkovirtalähteellä. Paristojen kesto on noin puoli vuotta..

Tietokoneysteys (AS608e)

AS608e -malli voidaan yhdistää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Diagnostic Suite-ohjelman avulla mittaukset voidaan siirtää tietokoneelle. Diagnostic Suite ohjelma mahdollistaa seuraavat toiminnot:

- Muokattavat tulostuspohjat
- Kehittynyt raporttisivu
- Istuntojen käsittely
- Tietokannan tallennus: OtoAccess® tai Noah -yhteensopiva

Automaattiset kynnysmittaukset (vain AS608e)

AS608e sisältää automaattisen Hughson Westlake -kynnysmittauksen. Kun testi on valmis, voidaan mittaustulos helposti palauttaa muistista ja näyttää Diagnostic Suite -ohjelmalla.

Laitteen ominaisuudet

- Vankka rakenne
- 11 taajuutta 125-8000 Hz
- Muokattavat taajuusvalinnat
- Ulostulo -10dB - +100dBHL
- Puhdasääni, uikkuääni ja pulssi
- Äänetön ärsykepainike
- Pariston ilmaisin
- Kantolaukku
- Potilaspainike (vakio AS608e-mallissa)
- Ulkoinen virtalähde (valinnainen)
- Melusuojakuulokkeet (valinnainen)
- Tutkijamikrofoni (vain AS608e)
- Tietokoneysteys (vain AS608e)
- Hughson Westlake-automaattinen kynnysmittaus (vain AS608e)


Kokonaispaino
alle 1,6 kg



Pehmeä kantolaukku



Raporttisivu Diagnostic Suite-ohjelmassa
(vain AS608e)

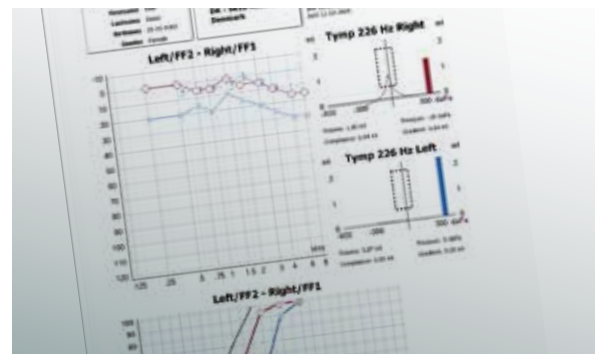

Tulostussivu Diagnostic Suite-ohjelmassa
(vain AS608e)

Science made smarter

Interacoustics on enemmän kuin uusimmat tuoteratkaisunsa

Tehtävämme on selvä. Haluamme näyttää tietä audiologiassa ja tasapainotutkimuksissa tekemällä vaikean helpoksi:

- Haasteet muutettu helpoiksi ratkaisuuksi
- Tiedon valjastaminen käytäntöön
- näkymättömät lääketieteelliset tilat tehty konkreettisiksi ja hoidettaviksi

Edistyksellinen tekniikkamme ja hienostuneet ratkaisumme helpottavat kuulolaan ammattilaisten elämää.

Haluamme luoda uusia käytäntöjä koko toimialalle. Ei vain tieteen vuoksi vaan voidaksemme tarjota ammattilaisten avulla erinomaista huolenpitoa miljoonille potilaille ympäri maailmaa.

Interacoustics.com

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com

Tutustu
tuotevali-
koimaamme
verkossa

Muut tuotteet



MT10
Kevyt tympanometri



AD226
Diagnostiikka-audiometri



Viot™
Video-otoskooppi

Tuotetiedot

Kaikkien tuotteidemme tekniset ja laitekohtaiset tiedot ovat ladattavissa verkkosivuiltamme.



Interacoustics